

Instrucciones de Colección por el Medico & Autoguiada por el Medico

Se le entrega dos bolsas. Una con las instrucciones del equipo de Colección de la muestra/ y una con un producto de desinfección.

Abra el empaque del equipo. Remueva el tubo y la toallita desinfectante. Ponga el tubo y la toallita desinfectante a un lado antes de iniciar con las instrucciones aquí debajo para coleccionar el espécimen requerido por su proveedor del cuidado de la salud.


ADVERTENCIA: La tapa es un peligro de asfixio, mantenga fuera del alcance de los niños. Si en cualquier momento el contenido de este tubo se derrama en su piel, u ojos, lave el área afectada con agua. **NO ingiera líquidos.**

1. Llene el tubo con saliva hasta la línea ondulada.




*. Llene el tubo hasta que su saliva (no incluyendo las burbujas) está en o justo más arriba de la línea ondulada. **NO LLENE DE MAS.**

2. Remplace el embudo con la tapa con el líquido. Remueva el embudo del tubo. Enrosque la tapa que esta adjunta. APRIETELA para dejar salir la solución que estabilizara el RNA en su saliva.

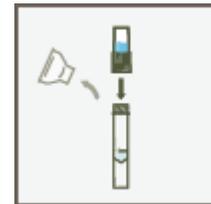

3. Enrosque firmemente la tapa para dejar salir la solución y selle el tubo. Usted sabe que trabajo cuando la solución azul sale dentro del tubo. Apriete firmemente para asegurarse que la tapa y el tubo están completamente sellados.

4. Agite el tubo por lo menos cinco segundos. Esto asegura que su muestra se mezcle completamente con la solución estabilizante

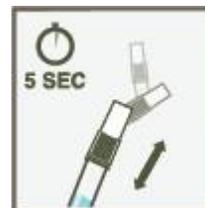

5. Limpie el tubo con la toallita de alcohol provista.
6. Confirme su Nombre y Fecha de Nacimiento, y coloque la etiqueta en el tubo.
7. Devuelva el tubo como le indique su proveedor de salud.

